


NOVAESTETYC
digital & biotechnology instruments

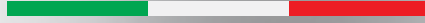


LIFT&SHAPE™

RADIO4™
Dynamic Quadripolar Tech

www.novaestetyc.it

L'esclusivo sistema componibile che si occupa degli inestetismi del corpo a 360°:
la tua Stazione di Bellezza

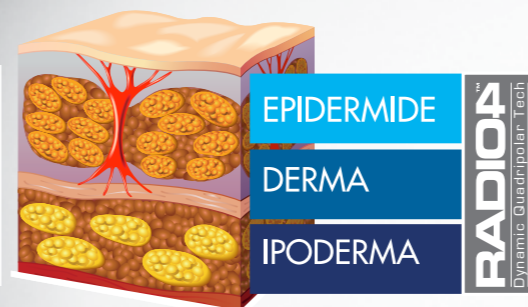

4RFH
RadioFrequency Fractionated Handle

- Acne*
- Rughe
- Cicatrici*
- Smagliature*
- Tessuti Ispessiti

VRF
Variable RadioFrequency

- Lifting
- Cellulite*
- Rassodamento
- Adipe localizzato

* Inestetismi da:

MODULARE

CONFIGURABILE

EFFICACE

SICURO

INNOVATIVO

- **RADIO4™ RADIOFREQUENZA QUADRIPOLARE DINAMICA** TECNOLOGIA PROPRIETARIA NOVAVISION.
- TRATTAMENTI **VISO-CORPO**.
- SENSORE DI CONTROLLO DEL MOVIMENTO A MANIPOLO.
- SENSORE PIROMETRICO PER LA COSTANTE RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA.
- **TRATTAMENTI CONFORTEVOLI**, NESSUN DOLORE.
- **RISULTATI IMMEDIATI ED EVIDENTI DALLA PRIMA SEDUTA**.
- EFFETTO **LUNGA DURATA**.

VISO - 4RFH

Resurfacing
Rughe
Inestetismi da acne
Inestetismi da cicatrici

"Codice a barre"
"Zampe di gallina"

VISO

Effetto lifting
Azione antirughe
Ridefinizione contorni del viso

Riduzione
"Doppio mento"

BRACCIA

Rassodamento
Modellamento (lipolisi)
Smagliature*

"Ali di pipistrello"

ADDOME

Rassodamento
Modellamento (lipolisi)
Smagliature*

FIANCHI

Rassodamento
Modellamento (lipolisi)
Smagliature*

"Maniglie dell'amore"

GINOCCHIO

Rassodamento
Modellamento (lipolisi)


COSCE

Rassodamento
Modellamento (lipolisi)
Smagliature*

GLUTEI

Rassodamento
Modellamento (lipolisi)
Smagliature*

"Culottes de Cheval"

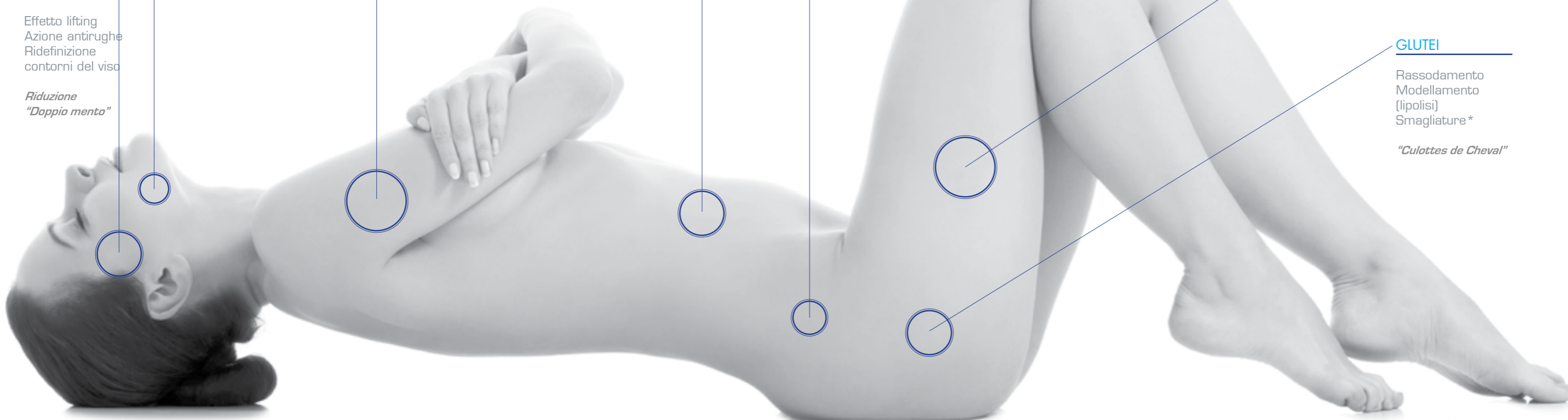

LIFT-SHAPE™

RADION™
Dynamic Quadripolar Tech

E' la tua soluzione di bellezza **TOTAL BODY**.

E' una piattaforma che funziona combinando una serie di tecnologie che si sviluppano partendo dalla radiofrequenza quadripolare dinamica **RADIO4™**.

Oggi la nuova stazione di bellezza ha il nome di **RADIO4™** evoluzione 3.0.

Il sistema **LIFT-SHAPE SYSTEM** è la soluzione completa per raggiungere i risultati desiderati, contrastare i segni dell'invecchiamento, ridurre circonferenza e inestetismi della cellulite.

IL TUO SISTEMA COMPONIBILE ALL - IN - ONE!

Unico ma totalmente flessibile rispecchia la tua esigenza di configurabilità dinamica e upgradabile nel tempo.

UN MANIPOLO PER OGNI ESIGENZA:

Manipolo 4RFH: 32 Pins - progettato e realizzato per garantire precisione e puntualità di trattamento, il manipolo per RF frazionata assicura risultati in totale comfort e sicurezza.

Manipolo Aree Piccole: 4 elettrodi - maneggevole e funzionale, il manipolo piccolo permette di agire in tutta efficacia e sicurezza anche nelle zone più piccole del viso: comfort assicurato al 100%.

Manipolo Aree Medie: 4 elettrodi - studiato per coprire le aree limite dove la via di mezzo costituisce l'ottimizzazione nel trattamento.

Manipolo Aree Grandi: 8 elettrodi misti - dedicato alle aree estese, permette di lavorare in tutta tranquillità garantendo la massima efficacia sull'area trattata.

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
SEZIONE DI CHIRURGIA PLASTICA



Manipolo 4RFH



Manipolo Aree Piccole



Manipolo Aree Medie




Manipolo Aree Grandi

NEW

EPIDERMIDE

Tripla efficacia: in superficie (epidermide) al centro (derma) ed in profondità (ipoderma).

Parliamo dall'epidermide: **RADIO4™ TECHNOLOGY** - grazie all'ausilio del manipolo frazionato che agisce attraverso una vaporizzazione selettiva di micro-aree dell'epidermide - accelera il fisiologico turn-over cellulare. Grazie al processo di resurfacing della cute si possono trattare efficacemente **tessuti ispessiti, rughe, macchie, cicatrici, smagliature.**

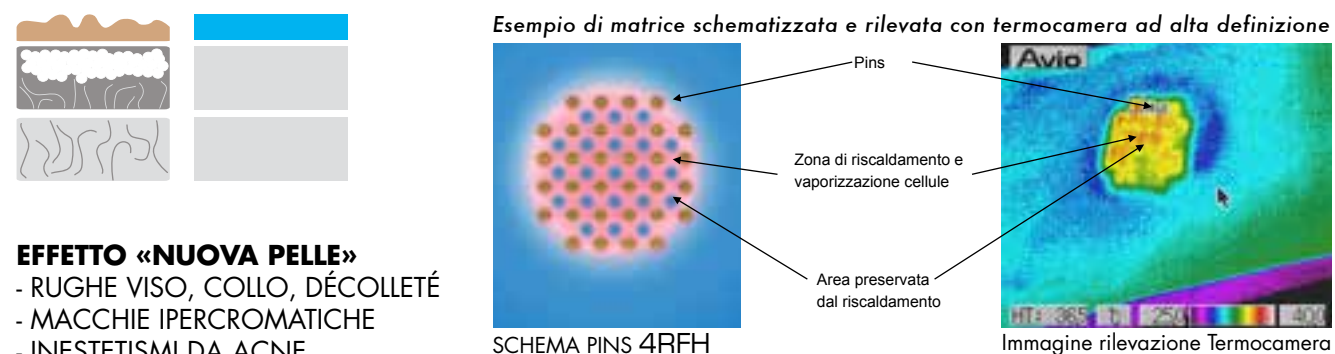

EFFETTO «NUOVA PELLE»
- RUGHE VISO, COLLO, DÉCOLLETÉ
- MACCHIE IPERCROMATICHE
- INESTETISMI DA ACNE
- INESTETISMI DA SMAGLIATURE E CICATRICI

TRATTAMENTO VISO - MANIPOLO 4RFH	
INESTETISMO	"CODICE A BARRE"
NR. SEDUTE	RISULTATO DOPO 6 SEDUTE



PRIMA

DOPO

TRATTAMENTO VISO - ACNE	
INESTETISMO	ACNE
NR. SEDUTE	RISULTATO DOPO 3 SEDUTE



PRIMA

DOPO

4RFH
RadioFrequency Fractionated Handle

RADIOFREQUENCY FRACTIONATED HANDLE - RICERCA E INNOVAZIONE CONTINUA

Manipolo 4RFH: manipolo frazionato dotato di 32 Pins dorati di contatto (**384 µNeedles™**) configurabili dal software, con sistema di pressione calibrata per superare lo strato corneo. Testa con Pins biocompatibile, rimovibile ed autoclavabile per una facile pulizia e manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE


DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
ALIMENTAZIONE	90 - 240Vac 50/60Hz - 150 VA
FREQUENZA RF	1 MHz quadripolare dinamica
POTENZA	25W
REGOLAZIONE POTENZA	digitale dal 5% al 100%
DIMENSIONI	L 57 x H 103,5 x P 48 cm
PESO	21 Kg

Le caratteristiche tecniche possono subire cambiamenti o variazioni

MADE IN ITALY

DERMA

L'incremento della temperatura nel derma provoca un'immediato **EFFETTO TENSORE** (TIGHTENING EFFECT) dovuto alla "denaturazione" delle fibre di collagene ed elastina esistenti, che diventano più corte e più spesse. Da qui ha inizio il processo che stimolerà i fibroblasti a produrre nuovo collagene e nuova elastina, per un tessuto ricompattato e ridensificato.

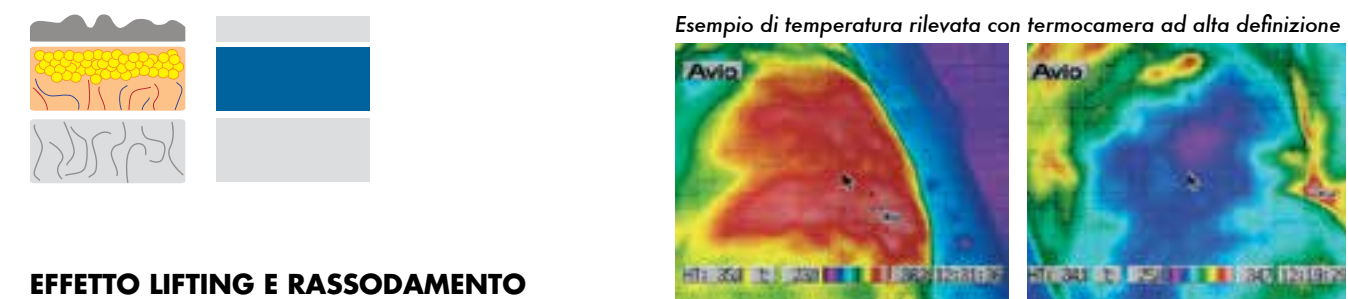

EFFETTO LIFTING E RASSODAMENTO TOTAL BODY

- BRACCIA, ADDOME, FIANCHI, SCHIENA
- GLUTEI E SOTTOGLUTEI, COSCE E INTERNO COSCE, GINOCCHIA, CAVIGLIE

TRATTAMENTO VISO - RUGHE	
INESTETISMO	RUGHE VISO
NR. SEDUTE	RISULTATO DOPO 4 SEDUTE



PRIMA

DOPO

TRATTAMENTO CORPO - INESTETISMO CELLULITE	
INESTETISMO	ADIPOSITÀ INTERNO COSCE
NR. SEDUTE	RISULTATO DOPO 7 SEDUTE




PRIMA

DOPO

RSS
RadioFrequency Safely System

RADIOFREQUENCY SAFELY SYSTEM - SICUREZZA ED EFFICACIA IN PRIMO PIANO

Il sistema **RSS™** brevettato da Novavision Group permette di sfruttare totalmente le potenzialità della radiofrequenza in modo sicuro ed efficace. La tecnologia **RSS™** include un **sistema dinamico per il controllo degli elettrodi**, che permette di veicolare l'energia in profondità salvaguardando la superficie da un incremento elevato della temperatura che potrebbe portare a scottature. Un **sistema di monitoraggio** del movimento del manipolo consente all'operatore di lavorare in totale sicurezza, supervisionando lo spostamento del manipolo stesso e prevenendo soste eccessive onde evitare una somministrazione dannosa dell'energia elettrica al derma. Un **sistema di rilevazione della temperatura** dell'epidermide tramite **sensori pirometrici** ad infrarossi permette all'operatore di valutare se si stanno ottenendo gli effetti desiderati (incremento di temperatura), salvaguardando allo stesso tempo il tessuto da un incremento eccessivo, che viene limitato automaticamente dal sistema avvisando l'operatore ed eventualmente bloccando l'emissione di energia.

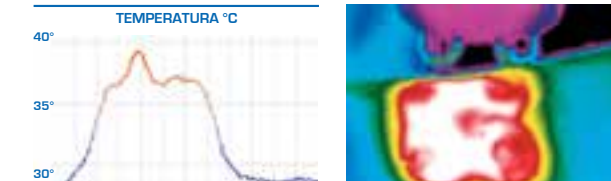


- Monitoraggio del movimento del manipolo
- Rilevazione della temperatura dell'epidermide
- Controllo dinamico degli elettrodi

Le termorilevazioni mostrano, in modo evidente, l'efficacia della tecnologia **RSS™** che consente di focalizzare l'azione nel punto di lavoro e di produrre significativi effetti termici anche in profondità.

IPODERMA

L'esclusiva variabilità di frequenza del sistema **RADIO4™** determina un incremento termico volumetrico e zonale a livello dell'ipoderma, provocando l'**essudazione** di glicerolo e acidi grassi liberi da parte degli adipociti, che si riducono così di volume.

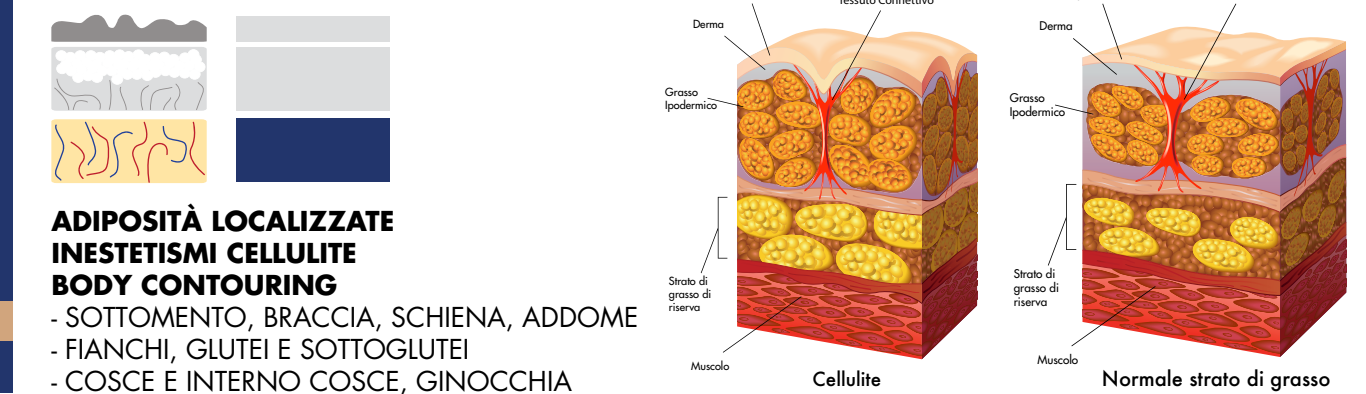

ADIPOSITÀ LOCALIZZATE INESTETISMI CELLULITE BODY CONTOURING

- SOTTOINTO, BRACCIA, SCHIENA, ADDOME
- FIANCHI, GLUTEI E SOTTOGLUTEI
- COSCE E INTERNO COSCE, GINOCCHIA

TRATTAMENTO CORPO - ADIPOSITÀ	
INESTETISMO	ADIPOSITÀ ADDOME (DONNA)
NR. SEDUTE	RISULTATO DOPO 4 SEDUTE



PRIMA

DOPO

TRATTAMENTO CORPO - ADIPOSITÀ	
INESTETISMO	ADIPOSITÀ ADDOME (UOMO)
NR. SEDUTE	RISULTATO DOPO 6 SEDUTE



PRIMA

DOPO

VRF
Variable RadioFrequency


VARIABLE RADIOFREQUENCY - LA VARIABILITÀ CHE FA LA DIFFERENZA!

L'esclusiva tecnologia **VRF™** agisce in maniera combinata all'ipoderma e al derma, permettendo un trattamento dell'area a 360°: le adipoità e gli inestetismi della cellulite sono ridotti, mentre la compattezza e il turgore del tessuto vengono preservati e migliorati.

AZIONE COMBINATA PER UNA PERFETTA EFFICACIA!

NOVAESTETYC

digital & biotechnology instruments

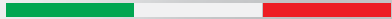

LIFT&SHAPE™

FACE
and
BODY

RADION™
Dynamic Quadripolar Tech



NOVAVISION

20826 Misinto (MB) Milano - Italia - Via dei Guasti, 29
tel. +39 02 96720240 - fax +39 02 96720232
info@novaestetyc.it

